

RF&EMS 複合美顏器

PASURIRE

## 商品概要

パスリルは4つのモード（CL・RF・EMS・P）+LEDを搭載した、夢の美顔器です。

さらに防水機能を搭載しているため、ヘッド部分を洗うことができ、衛生的に使用できます。


### 4つのモード



# そんな想いで誕生したのが PASURIREです。



# 機器説明

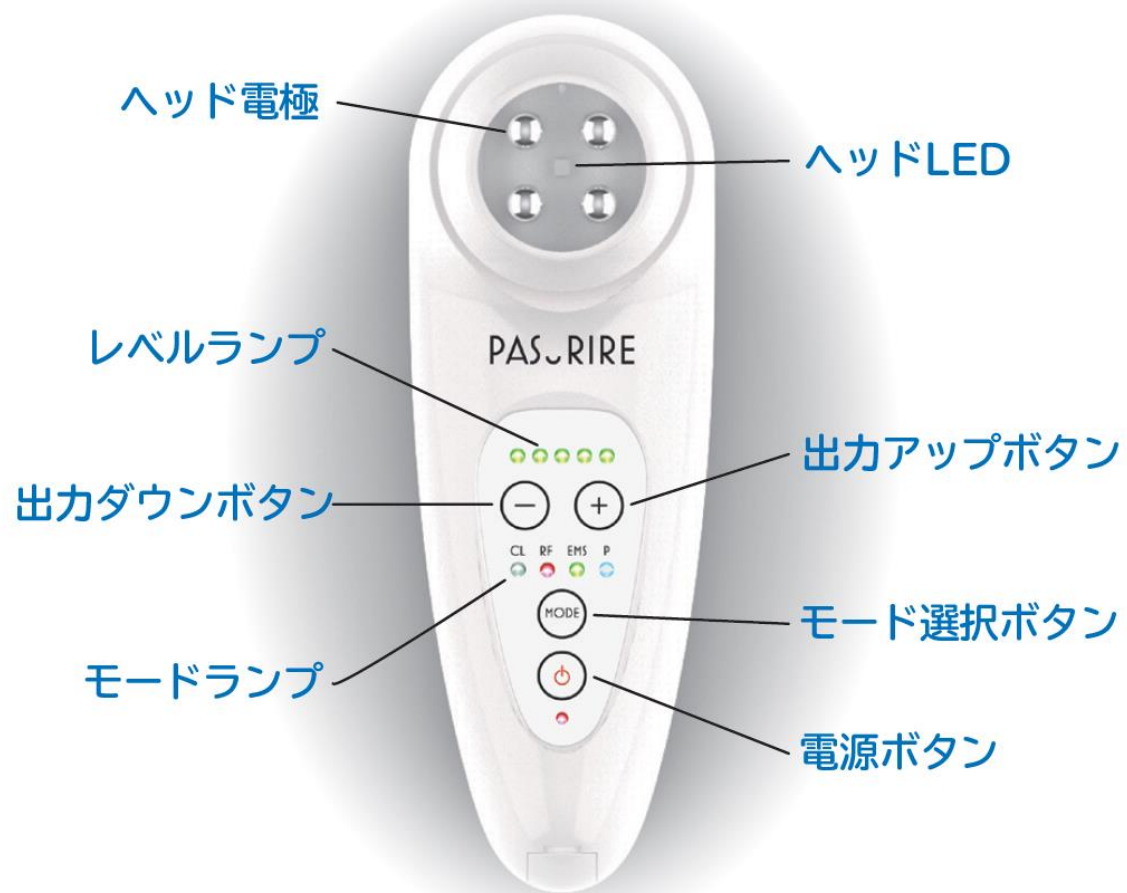


## 安全機能（過電流保護）

出力中、規定値を超える電流が流れたときに自動的に出力レベルを調節する機能です。安全なレベルになるまで警告音が鳴り、その間は出力レベルを上げることはできません。

## 音の操作

出力を行っていない状態で出力ダウンボタンを長押し(3秒)すると、音量のON/OFFを切り替えることができます。  
※異常停止音および終了音はOFFにはなりません。

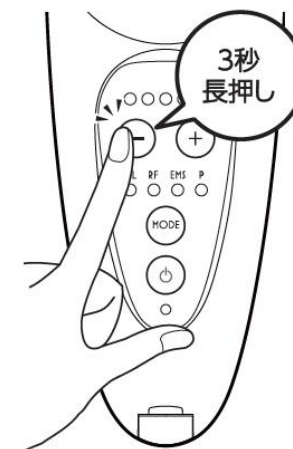


# 4モード×8つの機能搭載

「自宅で究極の美肌と小顔を目指す」医療用最先端技術から生まれたオールインワン本格美顔器「パスリル」。



- イオンクレンジング
- RF(ラジオ波)
- EP(エレクトロポレーション)
- パスリル波(PDM波)
- EMS(特殊波形)
- ミリカレント
- イオン導入
- LED

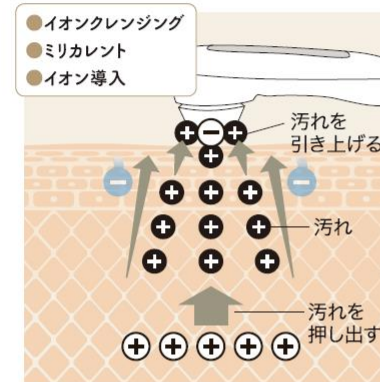

## CL MODE

エレクトロクレンジングモード

### ごっそりクレンジング革命

クレンジングや洗顔では落としきれない、毛穴のマイクロな汚れ\*や深い細胞の汚れまで取り除きます。また、ミリカレントにより、筋繊維の修復や細胞状態の正常化も期待でき、驚きの効果を発揮します。

※(+ファンデーション汚れや化粧カス、(-)タバコや排気ガスによる汚れ

顔 首 デコルテ




## RF MODE


ラジオ波モード

### 深部までやさしく温める

RF(ラジオ波)の中でも美顔器に最適な低めの周波数帯を採用しているため、肌の奥深くまでじっくりと温め、顔のたるみ、肌トラブルをカバーします。

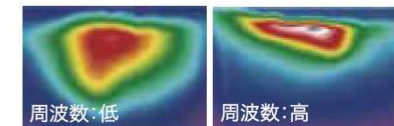

顔 首 肩 デコルテ 二の腕

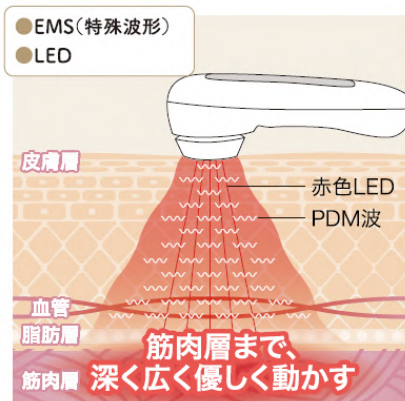

## EMS MODE


EMSモード

### 特殊電流による顔筋トレーニング

高・中・低周波をブレンドした特許取得  
※特殊波形のEMS(PDM波)を採用。  
「面」で筋肉を動かすことにより、広範囲で筋肉を動かし、優しい振動で心地よい刺激を与えます。「凝っている部位」はほぐし、「鍛えたほうが良い部位」は鍛えてくれる優れモノのモードです。

※特許番号:4174825号

顔 首 肩 デコルテ 二の腕

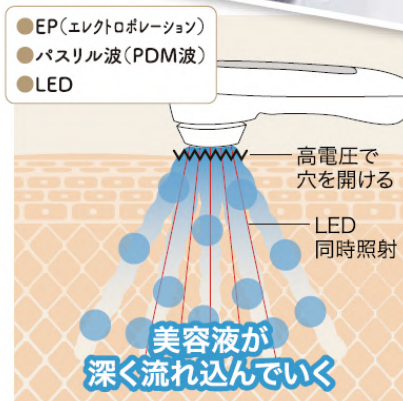

## P MODE

パスリルモード

### EMSとポレーションを同時に

特殊複合波形『パスリル波』は特殊波形EMSとエレクトロポレーション、赤色LEDを融合させた1モード3役のスペシャルケアモード。パスリルの循環機能により、肌表面からアプローチし、美容成分を奥深くへ浸透させることができます。

顔

## EXPERT VOICE / 専門家の声



「パスリルはお肌にやさしく、美容成分を浸透させてくれる。」

パスリルは医療機器メーカーで数年間の開発期間を経て完成した美顔器であり、全てのモード、機能が考えつくされています。お肌に余計な負担を掛けずに、深部まで効果的なトリートメントを送り込むので安心して使える設計です。

医学博士・日本抗加齢医学会専門医 /  
日本抗加齢美容医療学会会員  
銀座小町クリニック 萩島恭子 院長

「パスリルはプロの現場でも  
自宅使いでも満足できる美顔器。」

パスリルをやるのとやらないのでは、メイクの仕上がりや持ちが全然違うので欠かせません。プロの現場でも自宅使いでも満足できる美顔器ってあまりないので、このパスリルには私も助けられています。

メイクアップアーティスト  
林 由香里 様



「あらゆる面でパワーアップした  
究極の美顔器です！」

パスリル完成後、プロの皆さんに使って頂いたところ、「前より汚れがごっそり取れて、透明感がすごい」「痛なくて効果がさらに出る」「スチーマーや浴室でも使えるのは最高！」など、感動のお言葉をたくさん頂き感謝しています!!

バルティール 渋谷店 店長  
末次 由佳



# CL MODE

エレクトロクレンジングモード

## ごっそり クレンジング革命

イオン  
クレンジング


イオン  
導入

ミリカレント

コットンには  
こんなに汚れが!



一日の終わりにメイクを落として洗顔をした後、CLモードを5分行った結果、普段落としきれない汚れがごっそり!

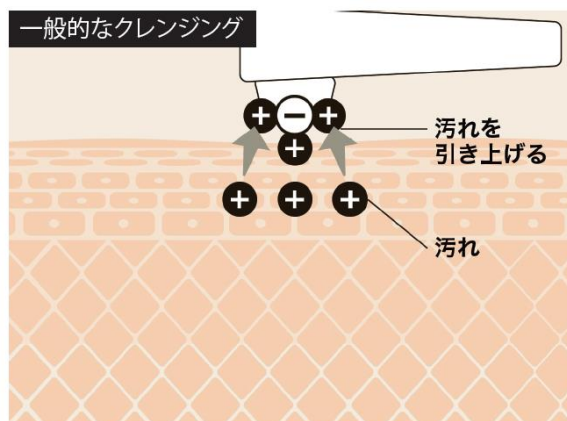

通常のクレンジングや洗顔では落としきれない、毛穴のマイクロな汚れ※や深い細胞の汚れまで取り除きます。マイクロカレントではなくミリカレントを採用することにより、筋繊維の修復や細胞状態の正常化も期待でき、驚きのクレンジング効果を発揮します。さらに、専用の導入美容液を使うことで、同時にイオン導入も可能に◎

・小鼻の黒ずみや肌のざらつきが  
気になるときにもオススメです♡



エレクトロクレンジング

ファンデーションのカス、古い角質、  
タバコのヤニ、排気ガスなどの粒子、  
花粉、皮脂汚れなど  
一気に吸着させ落とします。

お肌を明るくトーンアップさせ、  
キメを整え、ハリや ツヤUP↑↑


# RF MODE

ラジオ波モード

深部まで  
やさしく温める



## ● ラジオ波はコラーゲンの産生が促進する!!

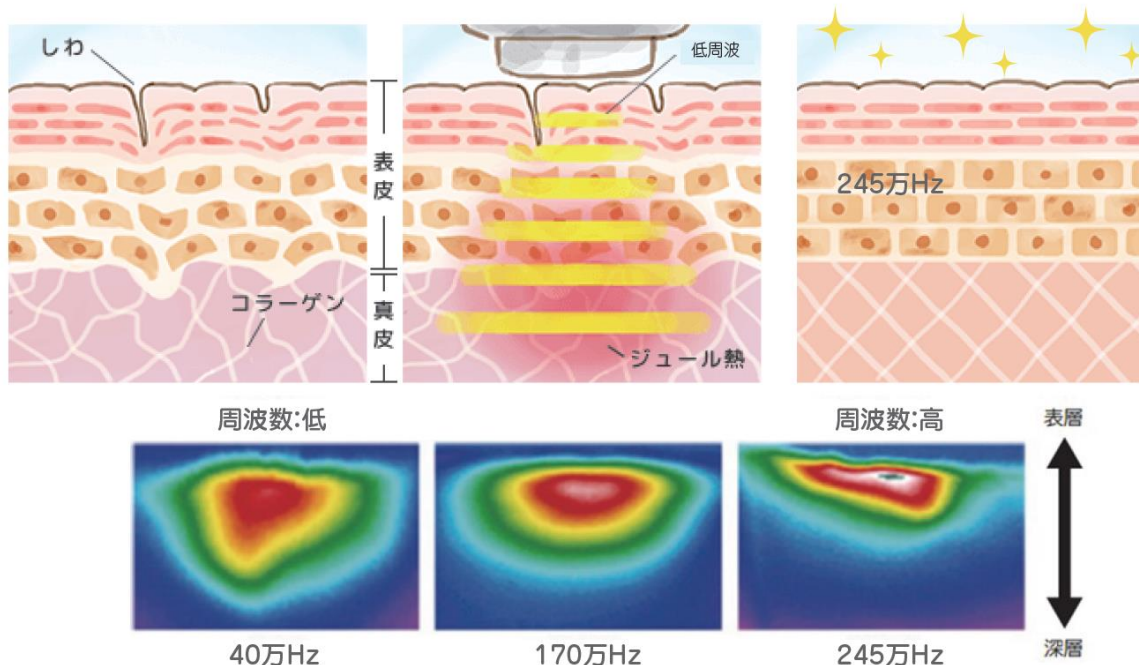

### ★美容成分の浸透力アップ

肌を温めることで肌の奥の層が活性化されるようになり、化粧水や美容液などの成分が浸透しやすくなります。

### ★コラーゲン作りを助ける

ラジオ波は衰えていくコラーゲンの生成機能に働きかけ、刺激を与えます。

### ★むくみの解消

ラジオ波で温めてあげることによって、むくみを解消することが可能です。

### ★血行促進


血の巡りがよくなることで、新陳代謝が高まったり老廃物を排出したりします。

RF(ラジオ波)で肌の深部まで温めることにより、顔のたるみへアプローチします。パスリルでは周波数の低いラジオ波を採用することにより、肌の奥深くまでじっくりと温めることができ、表面火傷などのリスクも抑制。さらに赤色LEDの同時照射により、シワや色素沈着の肌トラブルをカバーします。

# EMS MODE

EMS モード

## 特殊電流による 顔筋トレーニング

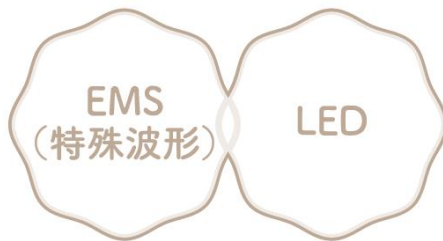


赤色  
LED

※赤色LEDのラジオ派・EMS・Pモードで同時発信

ニキビ・しわ・しみ・くすみ跡の改善に効果的。

赤色LED光を皮膚の深部まで到達させることにより、  
線維芽細胞を活性化し、コラーゲン・エラスチンの生成を促します。  
これにより照射後より皮膚の質感が改善し、回数を重ねることで  
小じわ・しみ・くすみ・毛穴、ニキビ跡の効果に期待できます。

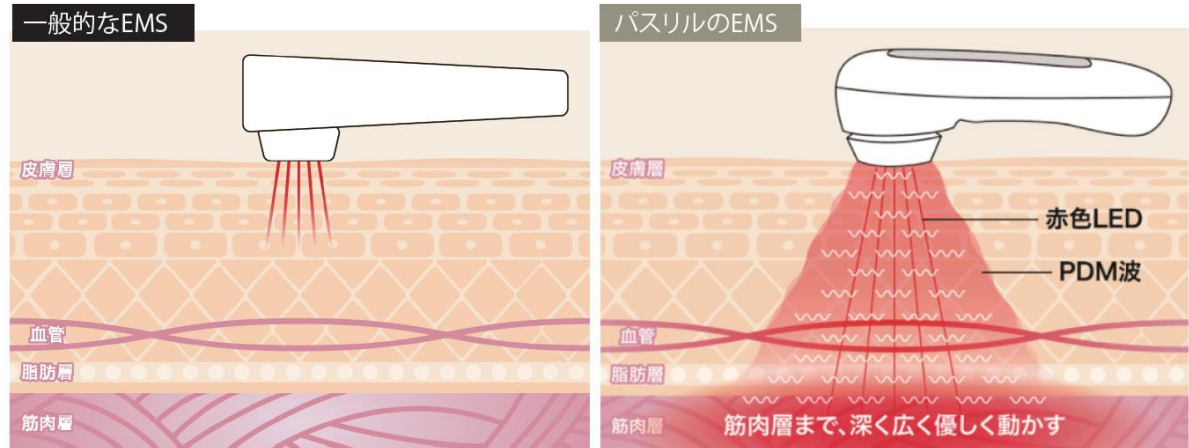

高・中・低周波をブレンドした特許取得※特殊波形のEMS(PDM波)を採用。

1~25万Hzの細かい波形が筋肉の奥深くまで広がり、「面」で筋肉を動かすことにより、  
広範囲で筋肉を動かし、優しい振動で心地よい刺激を与えます。

さらに赤色LEDが血管へ届き、めぐりを改善し、トレーニング効果を高めます。

※特許番号:4174825号





# P MODE

パスリルモード

## EMSと ポレーションを同時に

パスリル波  
(PDM波)


LED

EP  
(ポレーション)


このような方にオススメ

- ★シミ・くすみが気になる
- ★美肌になりたい
- ★毛穴の開きがきになる
- ★ニキビ・ニキビ跡がある
- ★乾燥肌 など..

一般的なポレーション

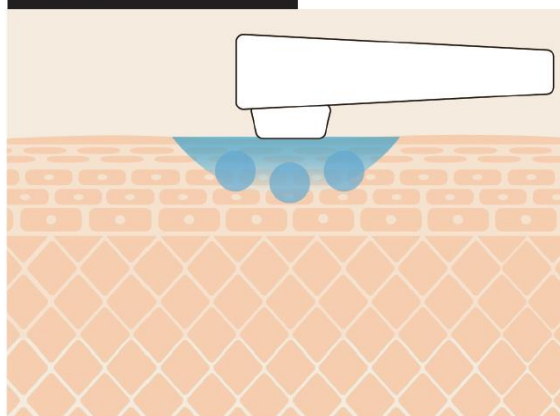


パスリルのポレーション

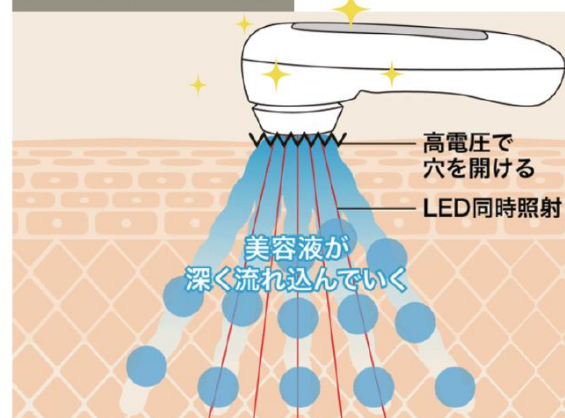

特殊複合波形「パスリル波」に、エレクトロポレーションと赤色LEDを融合させた、  
1モード3役のスペシャルケアモード。


パスリルの循環機能により、肌表面からのアプローチだけではなく、  
体内からも美容成分を奥深くへ引き寄せすることで、より深く浸透させることができます。

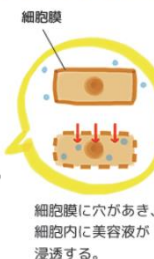

細胞膜に穴があき、  
細胞内に美容液が  
浸透する。

エレクトロポレーションなら

美容有効成分が、お肌の真皮層までしっかり浸透

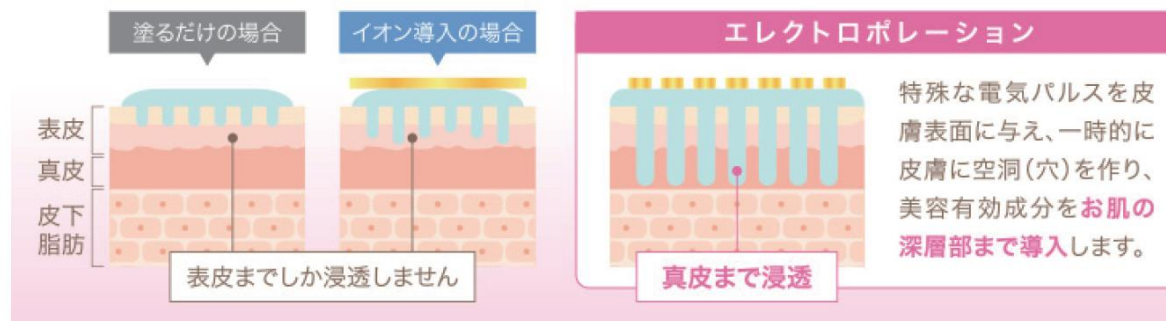

イオン導入もエレクトロポレーションも普段のスキンケアに比べて高い浸透力があるのが特徴ですが、  
エレクトロポレーションの浸透率はイオン導入の約20倍と高い浸透力をもつことがわかります。  
また、エレクトロポレーションでの導入の方が、より細胞の奥まで有効成分を届けられるともいわれています。





専用 GEL 以外でも、現在使われている美容液等でパスリルは使用可能です。